

- ❗ 使用する際は周囲の安全を確認してから使用してください。近くにお子様がいるときは特に注意してください。事故やケガの原因となります。
- ❗ 使用しているときは両脚に人を近づけないようにしてください。お子様が居るときは特に注意してください。事故やケガの原因となります。
- ❗ 使用しているときはフットプレートより下に手や足をいれないようにしてください。事故やケガの原因となります。
- ❗ コードは束ねたままで使用しないでください。発熱する原因となります。
- ❗ コードの結束バンド等を取り外した後はお子様等の手の届かないようにしてください。飲み込みますと非常に危険です。

### ⚠ 注意

- ❗ 使用中に身体に異常があらわれたり感じたりした時、又は使用しても効果が現れない時は、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。事故や体調不良の原因となります。
- ❗ 100kg以上の負荷を乗せて使用しないでください。故障の原因となります。
- ❗ 使用中は眠らないでください。無意識での使用は、けがや体調不良の原因となります。
- ❗ 他の治療器と同時に使用しないでください。体調不良の原因となります。
- ❗ 幼児や自分で意思表示できない人、身体の不自由な人は使わないでください。事故やけがの原因となります。
- ❗ 浴室など湿気の多い場所で使わないでください。また、水や湯をかけないでください。けがや故障の原因となります。
- ❗ 正しい姿勢で使用してください。けがや体調不良の原因となります。落としたり、踏んだり等の強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。
- ❗ 電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。感電や故障の原因となります。
- ❗ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがの原因となります。
- ❗ 使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電やショート、発火の原因となります。
- ❗ 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。感電やショート、発火の原因となります。
- ❗ 停電のときは直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ 幼児の手の届くところでは使用しないでください。事故やけがの原因となります。
- ❗ 本器は家庭用電気製品であるため、廃棄の際は注意してください。廃棄するときにはそのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。

## Sania サニア工業株式会社

〒497-0002 愛知県海部郡七宝町大字高手上江越1530  
 ☎ 0120-445-421 FAX 052-441-5478


## 製造元 サニア工業株式会社

# 家庭用電気マッサージ器



## 取扱説明書(保証書付)

管理医療機器(認証番号:220AGBZX00140000)

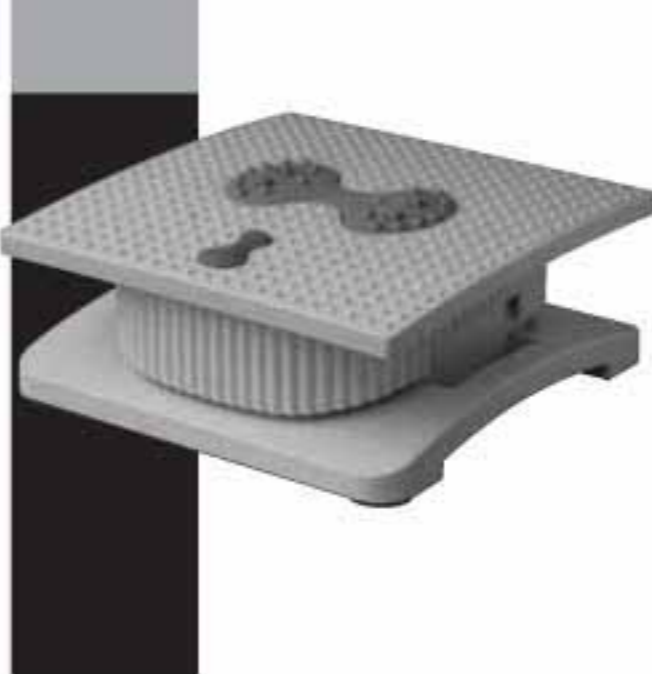

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。  
 ■この取扱説明書をよく読んでから使用してください。  
 不適切な取り扱いが事故につながります。  
 ■この取扱説明書はかならず保管してください。  
 ■保証書には必ず記入をお受けください。

## 安全上の注意

必ずお守りください。  
 お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前にこの「安全上のご注意」をよく読んでうえ、正しくお使いください。

■「⚠ 警告」と「⚠ 注意」の意味	
<b>警告</b> 取り返しの利かなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	<b>注意</b> 取り返しの利かなかった場合、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。
■「ⓧ記号」の意味	
禁止を示します。	やっていただきたいことを示します。

## ⚠ 警告

- ❗ 次の人は使用しないでください。(事故や体調不良を起こす原因となります。)
- (1) 生理中や妊娠している人 (2) 安胎を必要とする人
- (3) 酒類を摂取している人 (4) 幼児や自分の意思表示ができない人、身体の不自由な人
- (5) 医師からマッサージを禁じられている人
- ❗ 次の人は必ず医師と相談してください。(事故や体調不良を起こす原因となります。)
- (1) ペースメーカーなど電磁誘起の影響を受けやすい体内埋込み型医療機器を使用している人
- (2) 糖尿病などによる感覚末梢障害等からくる知覚障害のある人
- (3) 骨髄、ようじの人、骨髄の骨折、脱臼、肉離れなど、急性(即時的)疼痛のある人
- (4) 医師の指導を受けている人や特に身体に異常を感じている人
- (5) 妊婦初期の不安定期、又は妊婦直後の人
- (6) 急性腰痛のある人 (7) 心臓に障害のある人 (8) 皮膚に炎症のある人
- (9) 安胎を必要とする人 (10) 体重35kg以上(有無)の人
- ❗ 本来の使用目的以外では使用しないでください。事故やけが、故障の原因となります。
- ❗ お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせないでください。事故やけが、故障の原因となります。
- ❗ 本体の中央部に乗り、端部には乗らないでください。事故やけが、故障の原因となります。
- ❗ お1人、1日5回を限度にお使いください。体調不良を起こす原因となります。
- ❗ 交流100V以外では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- ❗ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、おじったり、束ねたりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- ❗ 電源コードや電源プラグが嵩んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショート、発火、故障の原因となります。
- ❗ 動かなかったり異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検、修理をご依頼ください。感電、発火の原因となります。
- ❗ ストープなどの熱いものの近くや布団や電気毛布、コタツの中では使用しないでください。感電、発火の原因となります。
- ❗ 分解や修理・改造は行わないでください。発火や感電、けがの原因となります。修理はお買い求めの販売店にご相談ください。
- ❗ スイッチON状態でプラグの抜き差ししないでください。

## 特長


- 強力モーターにより体重差に関係なく縦刺激を全身に与えると同時に、足裏(土踏まず部分)にも縦刺激を与えます。
- 約1分間で自動停止するタイマー内蔵。  
※どんな気持ちの良いマッサージでも過ぎると身体に良くありません。
- オートオフのタイマー機能で使いすぎ、切り忘れを防止します。
- お子様からお年寄りまで安心してご利用いただけます。
- 使いやすい大型スイッチ、シンプルな操作で簡単にご利用いただけます。

## 効能効果

あんま、マッサージの代用

- (1) 疲労回復。
- (2) 血行をよくする。
- (3) 筋肉の疲れをとる。
- (4) 筋肉のこりをほぐす。

## 各部の名称

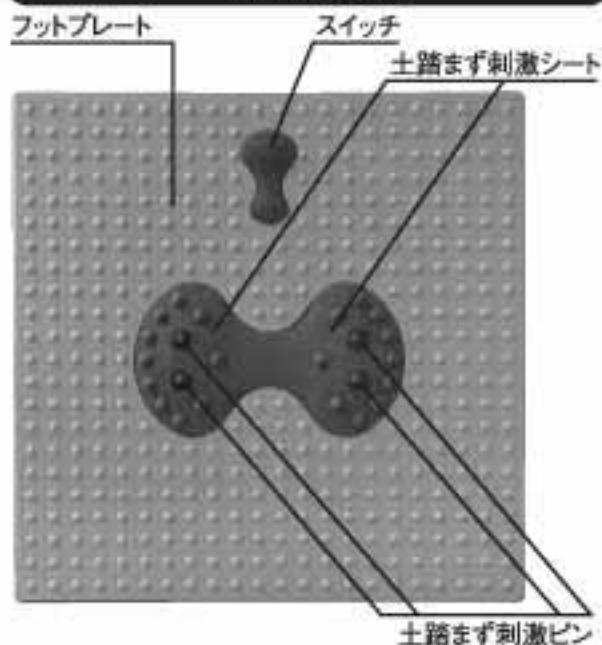

## 使用上の注意事項について

- (1) 外観上、製品に故障(ホリのハズレ、ゆるみ等・コードのキズ、破れ等)のないことを確認してください。
- (2) スイッチが正常に作動することを確認してください。
- (3) しばらく使用しなかった本器を使用するときは、正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。

## 使い方

- ①電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
- ②土踏まず刺激シートに足裏の土踏まず部分が当たるようにのってください。  
●立って使用する  
全身に振動が  
いきわたります。  
少し膝を曲げると  
頭は振動せずに  
使用できます。
- 座って使用する  
下半身を中心に  
振動させます。
- ③スイッチを入れます。  
※ひょうたん型の腕らみが  
大きい方を押してください。
- ④途中で止めたい場合は、もう1度スイッチを押してください。  
直ちに停止します。
- ⑤電源プラグをコンセントから抜きます。

体調に合わせて1日3〜5回を目安にお使いください。  
(使いすぎは体調不良を起こす原因となります。)  
また、連続5回以上のご使用は機械を傷める原因となりますので間をとってご使用ください。

### タイマーについて

本製品は過度の連続使用による性能劣化を防ぐため、内蔵タイマーによって約1分間で自動的に停止します。再度ご使用になる場合は10秒程度待ってからスイッチを入れてください。

### 警告(事故やけが、故障の恐れあり)

- 安定性のよい場所で使用してください。
- マッサージ以外の目的で使用しないでください。
- 幼児に使わせたり、本体の上で遊ばせないでください。
- 機械を長持ちさせるため連続5回以上の使用はしないでください。それ以上使用する場合は30分程度休ませてから使用してください。(過度の連続使用は故障の原因となります。)
- 野外での使用はしないでください。
- 100kg以上の負荷を乗せて使用しないでください。
- 本機の持ち運びや使用時に足や物をぶつけないように注意してください。
- 土踏まず刺激シートにある刺激ピンには足裏の土踏まず部分以外はのせないでください。

## お手入れ及び保管について

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをする恐れがあります。
- 本体のお手入れは、水でうすめた食器用中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼってから拭き、その後乾いた布で拭き取ります。
  - シンナーやベンジン、スプレー式クリーナー類は使用しないでください。
  - 本器の保管については湿気の少ない所に整理保管してください。

## 安全装置について

長時間の連続使用や、過負荷状態が続くと内部温度が上昇し安全装置が働き、動作が停止します。  
この場合は、電源プラグをコンセントから抜いて1時間程度休ませてからご使用ください。

## こんなときは

こんなときは	調べる場所	処置
動かない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
	電源コードが傷んでいませんか	修理を依頼してください。
	お買い上げ直後ですか	新品使用時にベルトの初期特性により起動しにくい場合があります。その場合は本体にお乗りになって電源をお入れください。また、冬季使用時には本器を室温と同じくらいに温めてご使用ください。
使用中に停止した	連続5回以上使用していませんか	安全装置が働きます。電源プラグを抜いて1時間程度放置して内部の温度を下げた後ご使用ください。
	スイッチを入れてから約1分間経過していませんか	内蔵タイマーによって約1分間で自動的に停止します。この場合約10秒待ってスイッチを入れてください。
	震動が強い	100kg以上の負荷が乗っていませんか
カタカタ音がする	正しい姿勢で乗っていませんか	正しい姿勢で乗っていない場合、カタカタ音が出る場合がありますが、故障ではありません。姿勢を正してご使用ください。
黒い粉が出る	故障ではありません	お買い上げ直後は部品の初期摩耗により黒い粉が出る場合があります。

## 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	70/80W
モーター出力	25W
タイマー	1分間
振動回数	50Hz:535〜950 回/分 60Hz:625〜1050 回/分
寸法	約 幅360mm×奥行360mm×高さ155mm
本体重量	約5.4kg
耐荷重	100kgまで

## 保証書

本製品は厳密な検査に合格したものです。通常の取り扱いにおいて、お買い上げの日から1年以内に製造上の責任による故障が本製品に生じた場合、本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。

形名	リフレッサー
ご購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日より1年間
●ご使用になっているお客様 フリガナ	
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
●販売店様	
ご氏名	
ご住所	
電話番号	

- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ご購入、転居等によりお買い上げ販売店での保証が受けられない場合、その他ご不明な点やご質問がありましたら、直接弊社にお問い合わせください。
- 本保証書は以下の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。修理等の際は上記をすべてにご記入のうえ、本書を製品に添えてお送りください。

## 保証規定

1. 修理依頼は製品全体にこの保証書を添えて、直接販売店にご持参、またはご送付ください。到着したものに限り修理いたします。
2. 次のような場合には保証期間でも有料修理になります。
  - 1) 本書の注意事項にない、壊れたご使用、お買い直したお取り換えによる故障または修理。
  - 2) 保管上の不備によるもの、および保証書の責に帰すと思われる故障、または落下等による故障。
  - 3) 不慮の火災、洪水、地震、および不可抗力によるもの、およびその後の原因による故障または修理。
  - 4) 火災、地震、洪水、台風、異常気象、およびその他の天災地災や事故などによる故障または修理。
  - 5) 保証書のご提供がない場合、およびその旨事項(ご購入日、販売店名等)の記入がない場合、引当額減額や各型別、検査を特に依頼される場合。
  - 7) 一審裁判以降(たとえは最高裁判所)のご使用の場合の故障または修理。

サニア工業株式会社  
リフレッサー  
商品型式: SOH-03